



GAMME 100% SANTÉ

Verres de Classe A

2020



« RAC0 »

L'offre 100% Santé Panier A de  **Koptical**

Afin de répondre aux exigences de la nouvelle réforme 100% Santé, Koptical vous propose une solution Verres - Montures, identifiable par la mention RAC0 :

- Une collection de montures répondant aux exigences de la réforme, soit 20 montures enfant et 34 montures adulte, garanties 2 ans.
- Des verres Durcis, Traités antireflets sur les 2 faces, Amincis selon la correction, 5 niveaux de correction, 4 indices et 1 carte de vue par porteur.

Unifocaux (de stock ou fab.)

RAC0 Unif. 1,74 AS SAR
RAC0 Unif. 1,67 AS SAR
RAC0 Unif. 1,6 SAR
RAC0 Unif. 1,5 SAR

Progressifs

RAC0 Prog. 1,74 SAR
RAC0 Prog. 1,67 SAR
RAC0 Prog. 1,6 SAR
RAC0 Prog. 1,5 SAR

Bifocaux

RAC0 Bif. 1,67 SAR
RAC0 Bif. 1,6 SAR
RAC0 Bif. 1,5 SAR


Proximité

RAC0 Prox. 1,67 SAR
RAC0 Prox. 1,6 SAR
RAC0 Prox. 1,5 SAR


Unifocaux RAC0 de Stock

Verres de Stock Unifocaux Organiques de classe A


**RAC0 Unif. 1,5
SAR ST 24**

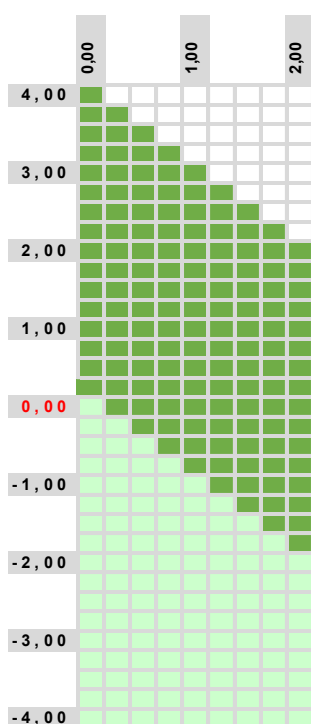



**RAC0 Unif. 1,6
SAR ST 24**

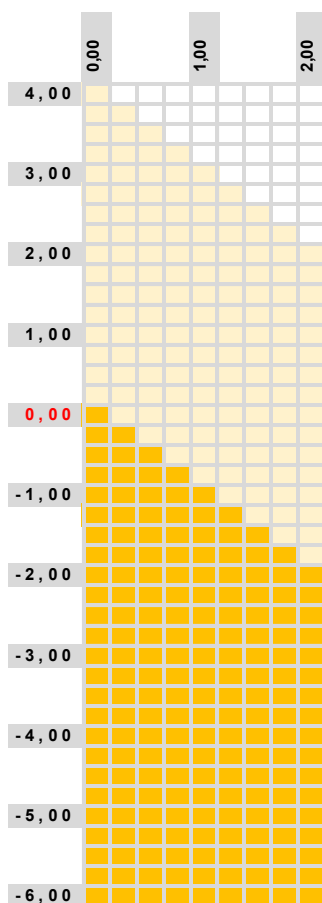

**RAC0 Unif. 1,67 AS
SAR ST 24**

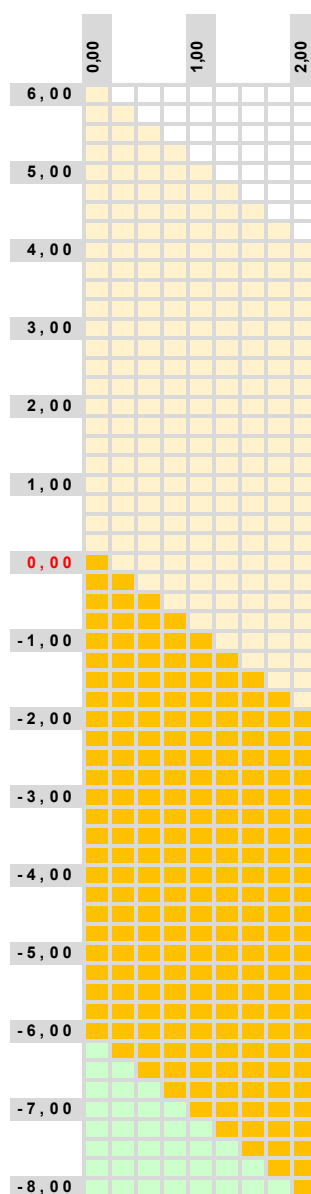

**RAC0 Unif. 1,74 AS
SAR ST 24**

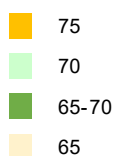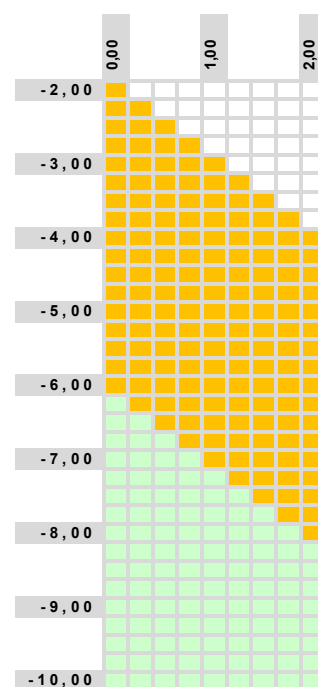

Unifocaux RAC0 de Fab.





Verres de Fabrication Unifocaux Organiques de classe A

**RAC0 Unif. 1,5
SAR**

**RAC0 Unif. 1,6
SAR**

**RAC0 Unif. 1,67 AS
SAR**

**RAC0 Unif. 1,74 AS
SAR**

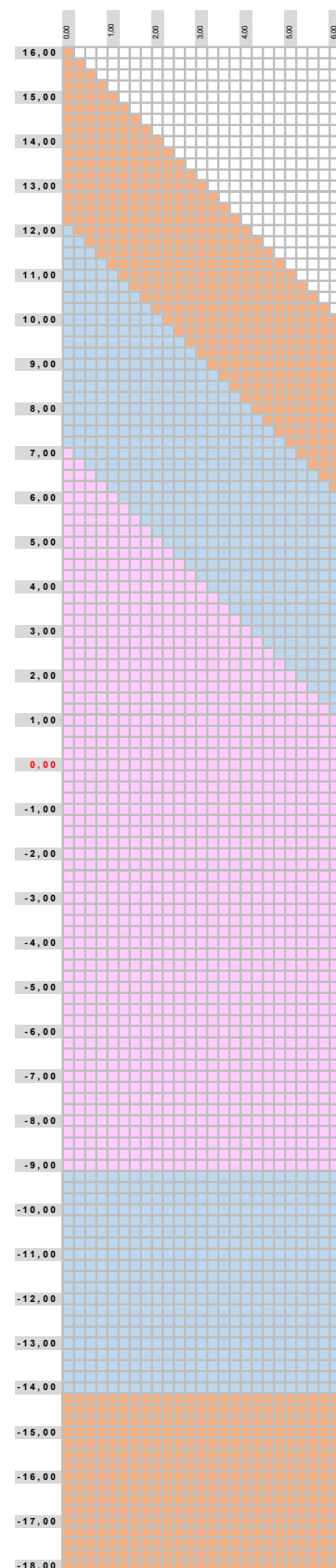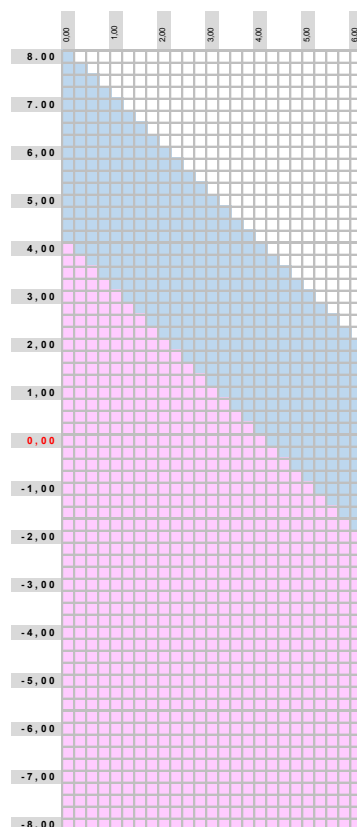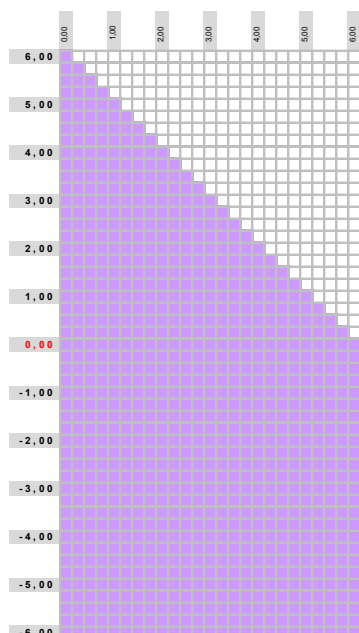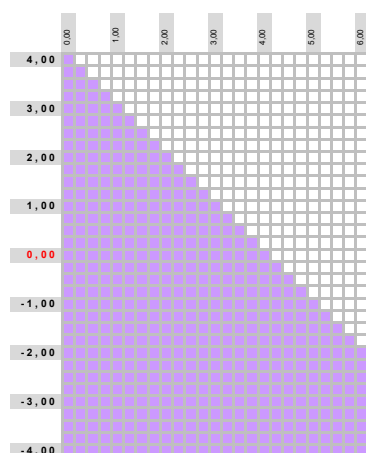

- 60-65-70-75
- 60-65-70
- 60-65
- 60

Progressifs RAC0


Verres Progressifs Organiques de classe A

RAC0 Prog. 1,5
RAC0 Prog. Court 1,5
SAR


RAC0 Prog. 1,6
RAC0 Prog. Court 1,6
SAR

RAC0 Prog. 1,67
RAC0 Prog. Court 1,67
SAR


RAC0 Prog. 1,74
RAC0 Prog. Court 1,74
SAR

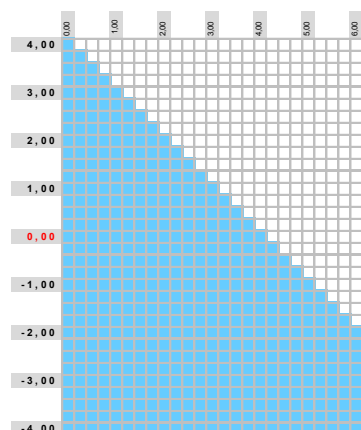


Addition de 0,75 à 3,50

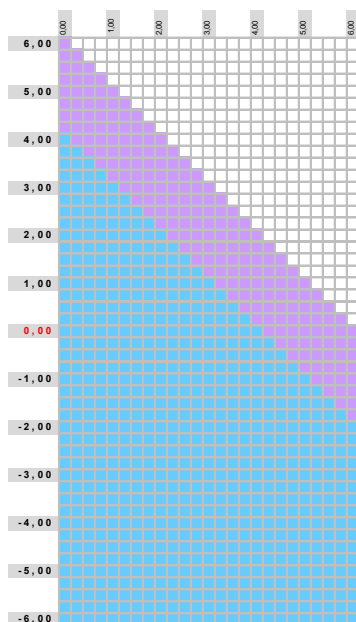

Addition de 0,75 à 3,50

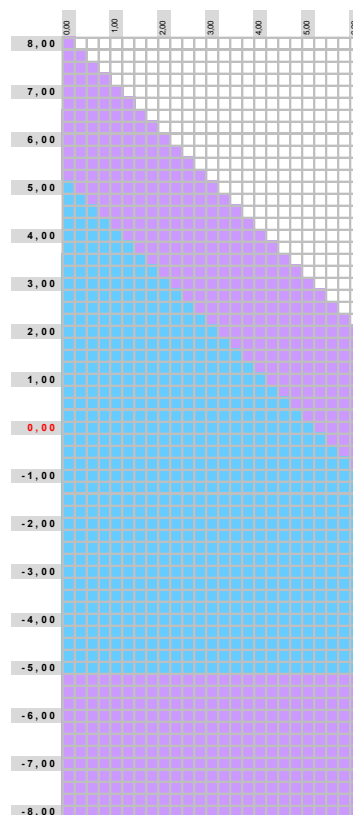

Addition de 0,75 à 3,50

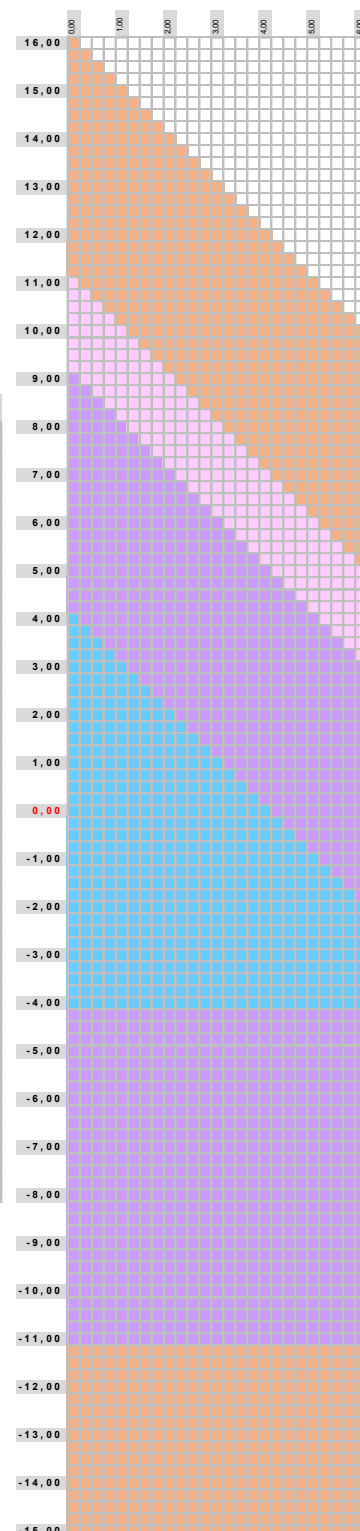

Addition de 0,75 à 3,50

RAC0 Prog.

Hauteur de montage	19	R0
	C : 16	R0S

Gravure Axiale	a		b	
	nasale	temp.	nasale	temp.
1.5	1.5	R0	1.5	R0
1.6	1.6	R0	1.6	R0
1.67	1.67	R0	1.67	R0
1.74	1.74	R0	1.74	R0

CONSEIL DE MONTAGE

Hauteur de montage :
19mm pour RAC0 Prog.
16mm pour RAC0 Prog. Court
La croix de centrage vision de loin se trouve
4mm au-dessus des gravures axiales.
Nous vous conseillons :
croix de centrage pleine pupille.

- 60/65-65/70-70/75-75/80
- 60/65-65/70-70/75
- 60/65-65/70
- 60/65




Proximité RAC0

Verres de Proximité Organiques de classe A

RAC0 Prox. Desk 1,5
RAC0 Prox. Office 1,5
RAC0 Prox. Room 1,5
SAR

RAC0 Prox. Desk 1,6
RAC0 Prox. Office 1,6
RAC0 Prox. Room 1,6
SAR

RAC0 Prox. Desk 1,67
RAC0 Prox. Office 1,67
RAC0 Prox. Room 1,67
SAR

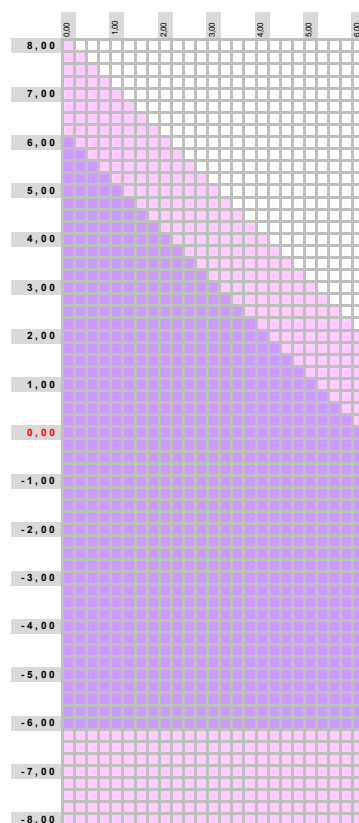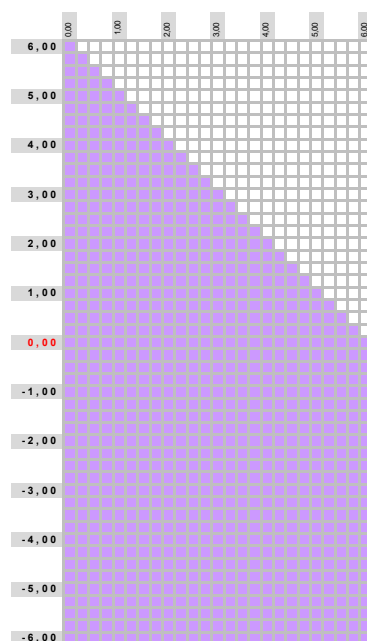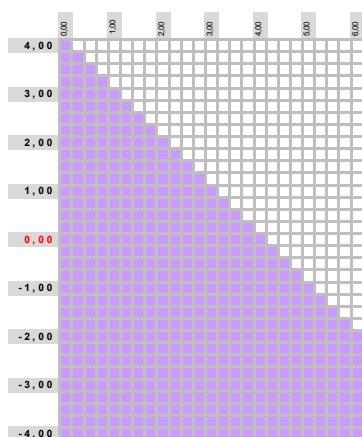

RAC0 Prox.


Hauteur de montage	Desk	RD
	Office Room	ROF RR
Gravure Axiale	Ⓟ	Ⓟ
	nasale	temp.
1.5	1.5	RD 2.00
1.6	1.6	RD 2.00
1.67	1.67	RD 2.00

60/65-65/70-70/75
 60/65-65/70

CONSEIL DE MONTAGE


Positionnement, nous vous conseillons :
 croix de centrage pleine pupille.
 Pour un confort optimum afin que les zones utiles ne soient pas coupées lors du montage, nous vous conseillons de respecter une hauteur minimum vers le haut de la monture de 13mm et de 16mm vers le bas de celle-ci.

RAC0 Bif. 1,5 SAR

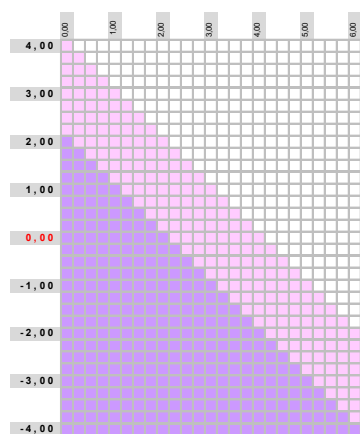


Addition de 1 à 3,50

RAC0 Bif. 1,6 SAR

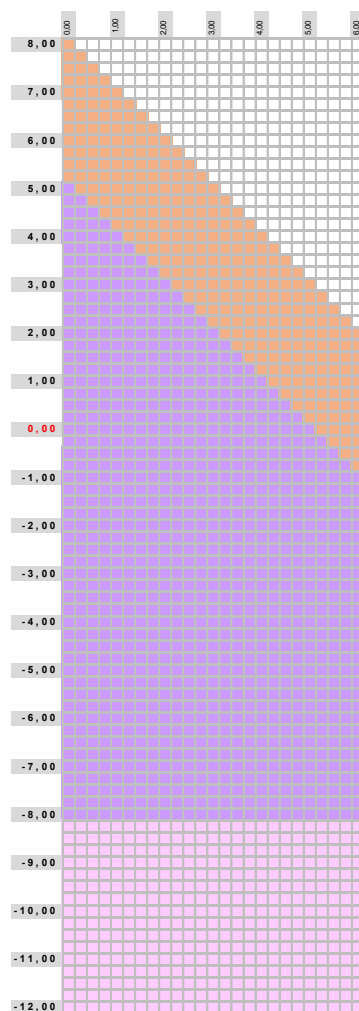

Addition de 1 à 3,00

RAC0 Bif. 1,67 SAR

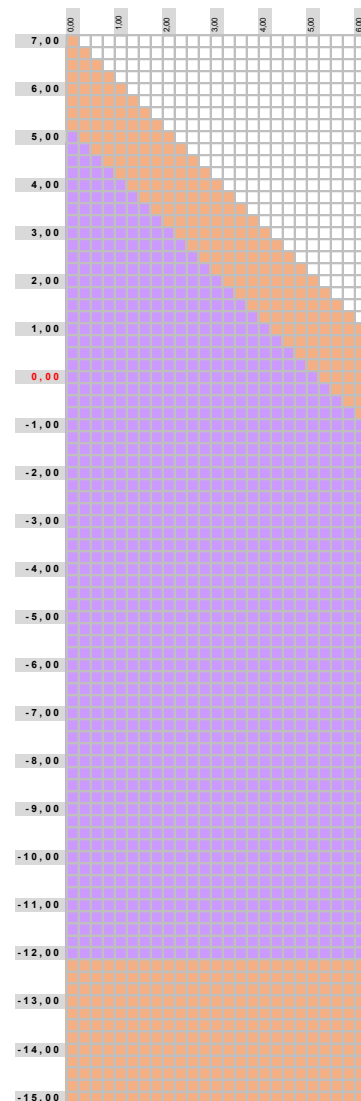

Addition de 1 à 3,00

- 60/65-65/70-70/75
- 60/65-65/70
- 60/65



16 Rue Paul Henri Spaak
77400 Saint-Thibault-des-Vignes
Tél : 01 83 76 41 41
Fax : 01 83 76 41 49
www.koptical.fr
webshop.koptical.fr